

GENESIS



mesoestetic®



mesoestetic

F Programas Especiales	A Anti-Envejecimiento	⚡ Fasen
C Programas Corporales	L Lifting	➡ Tratamiento Especializado
L Programa Libre	P Pielles Sensibles	↻ Intensivo Exfoliación + Nutrición
	C Contorno de Ojos	↻ Masaje
	D Doble Mentón	

GEN



→
siguiente


sistema



Bienvenidos a la tecnología SmartDrivity™

La **fusión inteligente de 4 tecnologías**
para conseguir **resultados espectaculares**
de manera efectiva, indolora y duradera.

Máxima respuesta terapéutica
La revolución de la medicina estética

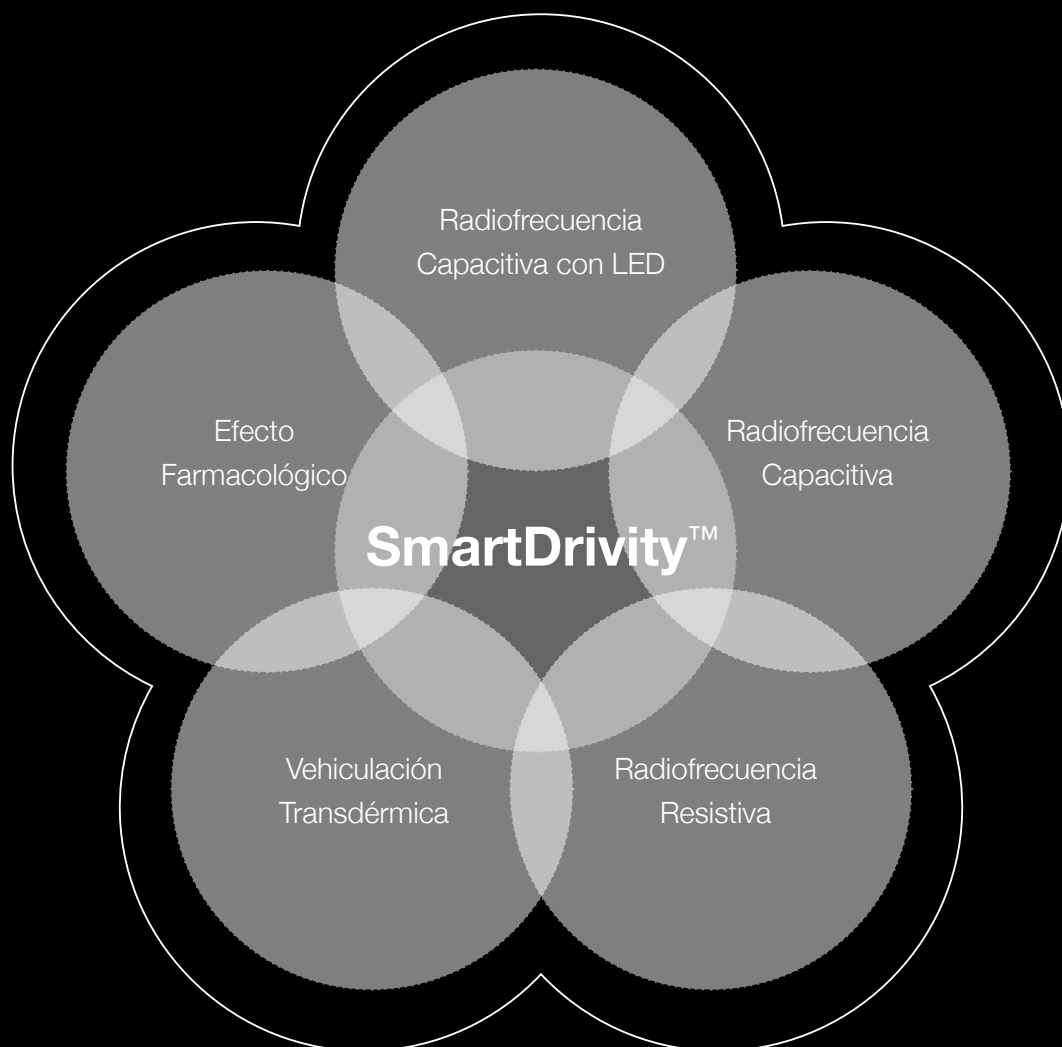


Efectos biológicos de Smart Radiofrequency




Radiofrecuencia Capacitiva con LED:

- Estimula el colágeno y elastina
- Promueve procesos bioquímicos
- Activación metabólica
- Acelera la reparación tisular
- Fortalece la pared de los capilares sanguíneos

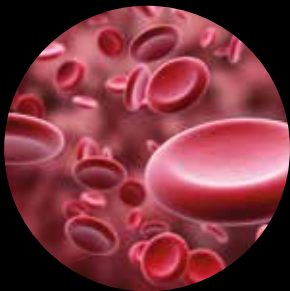

Radiofrecuencia Capacitiva:

- Potencia la actividad fibroblástica
- Vasodilatación
- Aumenta la oxigenación celular y tisular
- Neocolagénesis
- Redensifica el tejido

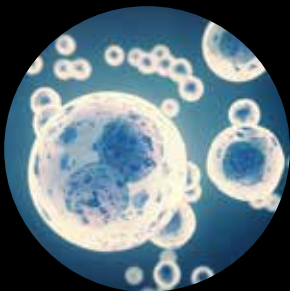

Radiofrecuencia Resistiva:

- Incremento del flujo sanguíneo en profundidad
- Favorece el drenaje
- Incremento de la lipólisis e inhibe la adipogénesis
- Estimula el colágeno y elastina

Efecto farmacológico de Smart Transcutaneous Drive



Vehiculación Transdérmica Inteligente:

- Tecnología basada en la electroforoporación
- Activación celular
- Vehiculación Transdérmica de activos de última generación


Smart Radiofrequency:

Estimulación tisular

Radiofrecuencia Capacitiva con Led Inteligente

Se trata de una diatermia regenerativa utilizada a baja potencia que tiene como objetivo actuar a nivel celular, y no incrementa la temperatura de la zona de tratamiento.

El LED rojo de alta intensidad potencia la actividad fibroblástica y estimulación tisular para la regeneración del colágeno y de elastina, eliminando la collagenasa, la enzima responsable de la descomposición del colágeno.

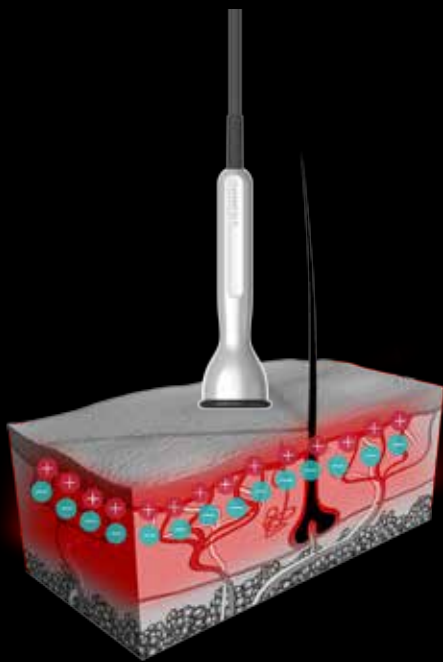


Indicaciones:

- Estimular puntos de reflexodrenaje
- Piel sensible: couperosis y rojeces.
- Estrías
- Cicatrices
- Daño actínico
- Tratamiento post-quirúrgico

Radiofrecuencia Capacitiva Inteligente


La acción principal es el aumento de temperatura en capas superficiales y medias de la piel. El efecto dieléctrico se produce por la fricción y oscilación de las moléculas de agua.

La consecuencia del aumento de temperatura promueve una migración fibroblástica incrementando la síntesis de colágeno, elastina y reticulina; provocando una reestructuración y redensificación tisular.

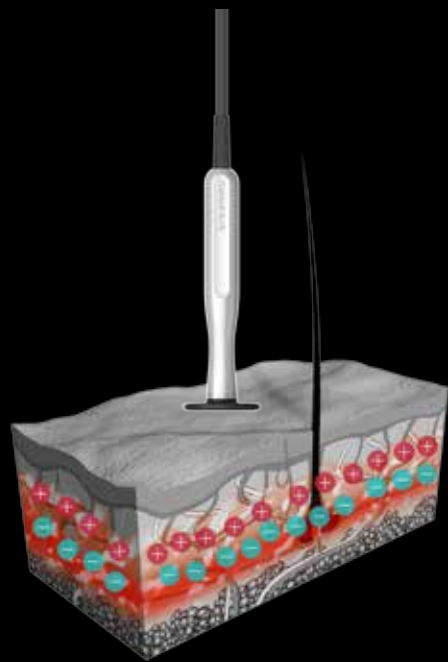

Indicaciones:

- Flacidez
- Arrugas
- Desvitalización
- Cicatrices post-acnéicas
- Post-parto
- Remodelación

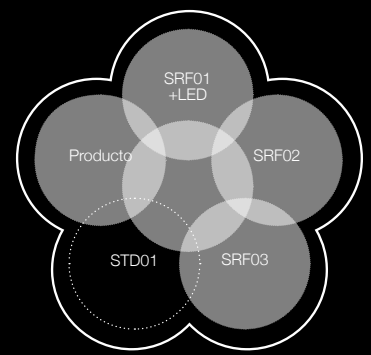


SmartDrivity™

Radiofrecuencia Resistiva Inteligente

La diatermia resistiva actúa creando un calentamiento profundo y controlado en el tejido, desencadenando múltiples reacciones a nivel dérmico y del tejido adiposo subcutáneo. Este calentamiento, favorece un incremento de la microcirculación y del drenaje.

Tecnología muy efectiva para tratar tejidos grasos y fibróticos.

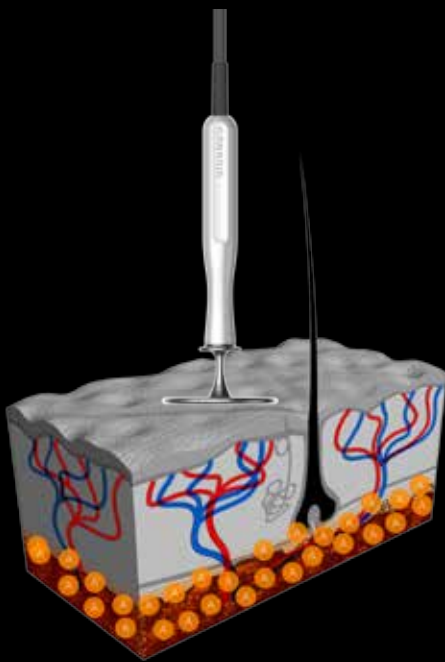

Indicaciones:

- Grasa localizada
- Celulitis
- Procesos post-quirúrgicos (liposucción)
- Retención de líquidos
- Flacidez
- Remodelación del contorno

G0 PTC Complex

Complejo formulado con activos que revierten los daños causados en el ADN provocados por factores intrínsecos y extrínsecos.

G0 PTC Complex absorbe la luz y activa los activos microencapsulados, transformando la luz en energía y trasladándola a las células para favorecer su reparación.



Ingredientes activos destacados:


- *Anacystis nidulans* (Alga marina primitiva)
- Fotoliasa Enzyme
Poder antioxidante
Antiinflamatorio
- *Phycocyanina* (Pigmento natural fluorescente)
Proteína

Smart Transcutaneous Drive: Aporte farmacológico

Conducción Transdérmica Inteligente

Tecnología basada en la electroforoporación; sistema de vehiculación transcutánea con evidencia científica contrastada en la liberación y dosificación de ingredientes activos en capas profundas de la piel.

Garantiza la máxima penetración de principios activos por vía anexial (electroforesis) y vía transepidérmica (electroporación).

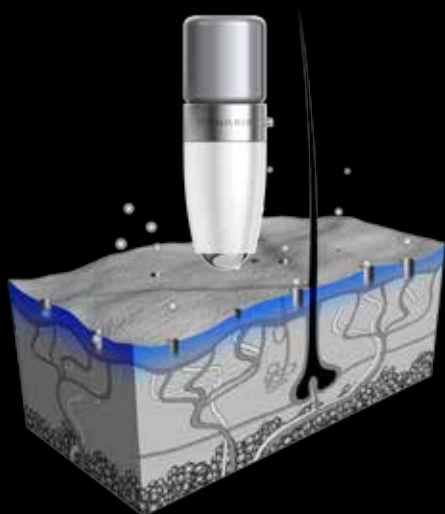

600%

más penetración del principio activo en el estrato córneo

1.200%

más penetración del principio activo en la epidermis

4.000%

más penetración del principio activo en la dermis

G1 Balancer

Booster monodosis de alta concentración de activos de bajo peso molecular inductor de la síntesis de colágeno y de elastina; proporcionando una profunda hidratación.

Sus propiedades terapéuticas le confieren la cualidad de preparar la piel antes de cualquier procedimiento quirúrgico acelerando la reparación tisular.




Indicaciones:

- Antiaging grado I y II
- Antiaging contorno de ojos
- Pre-quirúrgico
- Reequilibrante celular



Fuente: estudio in-vitro de mesoestetic

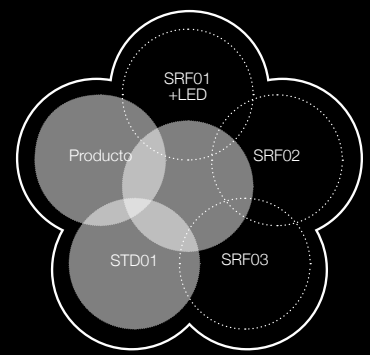

SmartDrivity™

G2 Regenerance

Booster monodosis de alta concentración de activos de bajo peso molecular activador y acelerador de los mecanismos de reparación de la piel.

Sus propiedades terapéuticas le confieren la cualidad de mejorar la capacidad de cicatrización y potencia la regeneración de los tejidos.




Indicaciones:

- Antiaging grado III y IV
- Post-quirúrgico

IN-VITRO RESULTS

Aceleración de la reparación tisular
Completa reparación del tejido tras 24h

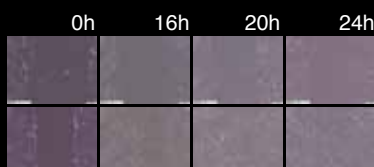

Fuente: estudio in-vitro de mesoestetic
Wound healing en fibroblastos

G3 Smoother

Booster monodosis de alta concentración de activos niosomados para potenciar su absorción.

Sus propiedades terapéuticas le confieren la cualidad de reducir la sensibilidad táctil como dérmica, reducir y prevenir la inflamación, así como reforzar los capilares y calmar la piel.




Indicaciones:

- Antiaging pieles sensibles
- Couperosis / rojeces

NIOSOMA

Interior hidrófilo

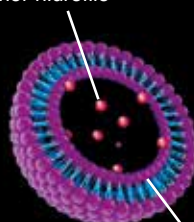

Membrana lipófila

G4 Push-up & Lift

Booster monodosis de alta concentración de activos reafirmantes que aceleran la síntesis de colágeno y elastina.

Sus propiedades terapéuticas le confieren cualidades drenantes y potenciadoras de la lipólisis, reduciendo el volumen y mejorando la textura de la piel.



Indicaciones:

- Celulitis
- Reafirmación de tejidos
- Push-up
- Drenante

ADIPOCITOS SIN TRATAR



+60%
Lipogénesis

ADIPOCITOS TRATADOS CON SMART SLIMFIT



Fuente: estudio in-vitro de mesoestetic
sobre adipogénesis y lipólisis

Programas Genesis: Versatilidad total

**44 programas Preestablecidos
+ Programa Libre**

F

Tratamientos
Faciales

Antiaging

Lifting


Pieles sensibles antiaging

Pieles sensibles rojeces

Contorno de ojos antiaging

Contorno de ojos post-quirúrgico

Doble mentón

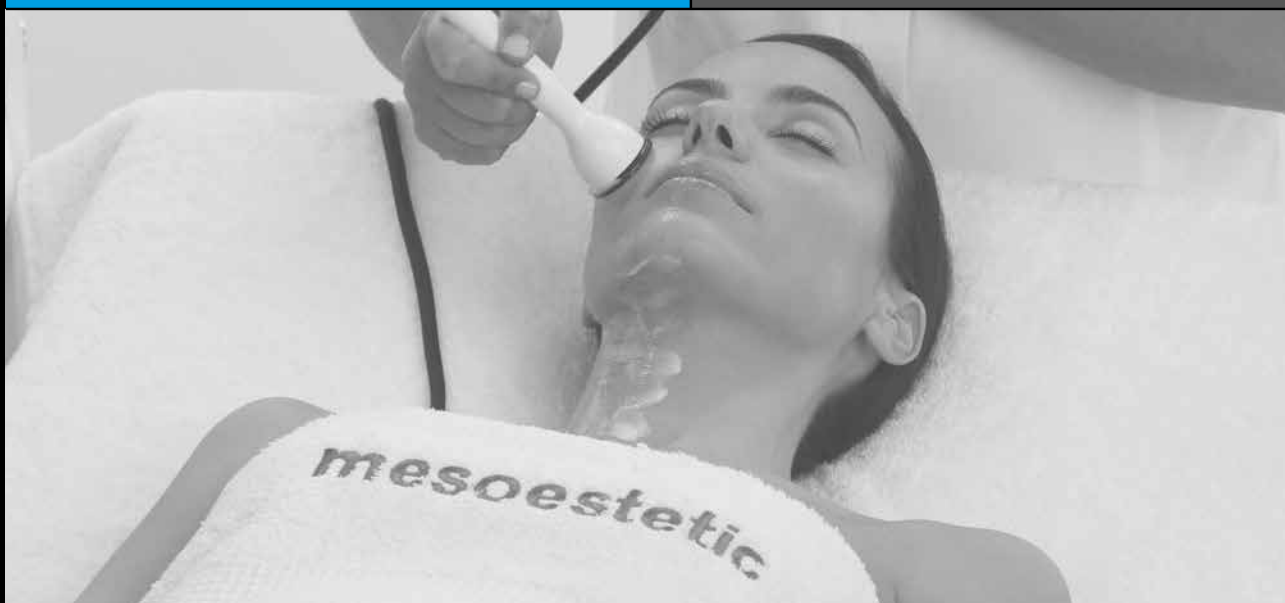

100%
personalizable

C

Tratamientos
Corporales

Senos remodelante

Senos post-quirúrgico

Glúteos

Piernas

Brazos

Abdomen remodelante

Abdomen post-parto



Multiplicidad de opciones para todos los tratamientos

Genesis pone a disposición del terapeuta múltiples opciones de tratamientos en cada uno de los programas preestablecidos del equipo, con los que poder ajustarse a las necesidades de cada uno de los pacientes y optimizar los resultados deseados.

TRATAMIENTO FLASH

1 Sesión



TRATAMIENTO INTENSIVO

Facial: se recomiendan 6 sesiones
Corporal: se recomiendan 10 sesiones

INTENSIVO ESTIMULACIÓN



INTENSIVO ESTIMULACIÓN + NUTRICIÓN



TRATAMIENTO MANTENIMIENTO


Se recomiendan sesiones cada 15 / 30 días



Protocolos eficaces y seguros

la guía perfecta

Genesis se apoya en unos protocolos de tratamiento diseñados a medida en función de la zona a tratar y tipo de programa, con el fin de conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible.

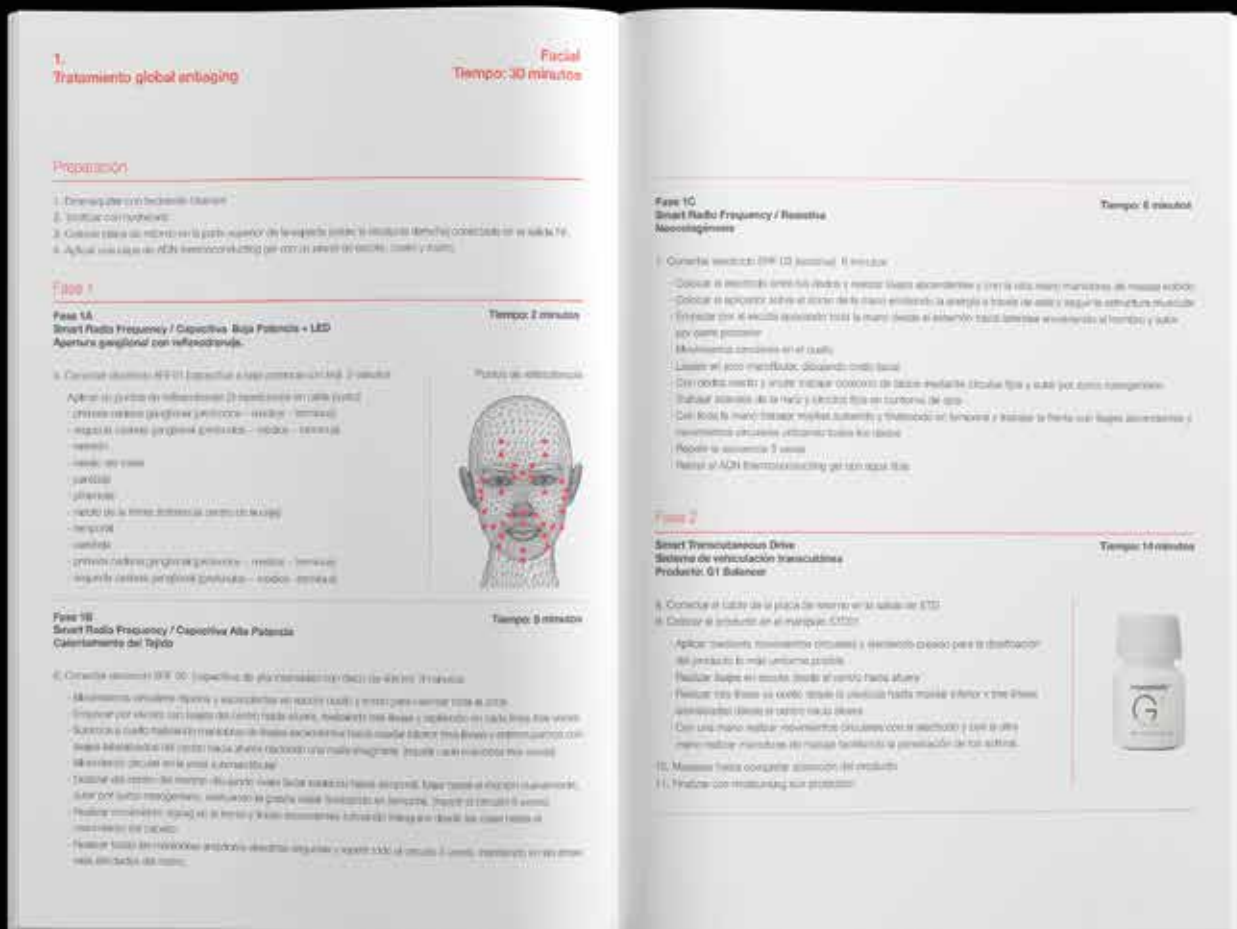

Eficacia demostrada

Resultados visibles desde la primera sesión

Se han realizado test in-vivo con un amplio grupo de voluntarias en las que se ha medido la capacidad reafirmante de **Genesis**, la de reducción de la profundidad de las arrugas y de hidratación.

Protocolo establecido:

Tratamientos Faciales: 6 sesiones. Tratamientos Corporales: 10 sesiones.
2 sesiones semanales / Productos coadyuvantes domiciliarios


Tratamiento Doble Mentón



Tratamiento Piel Sensible



Tratamiento Abdomen Remodelante

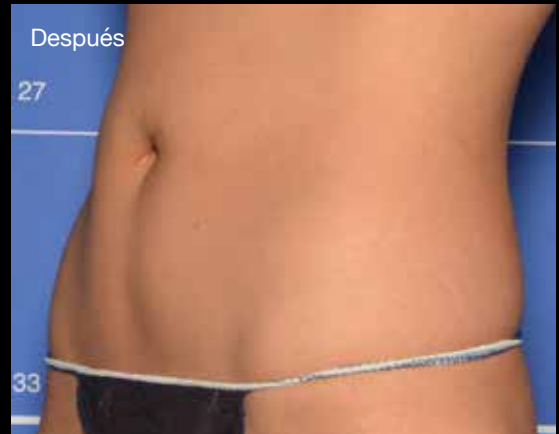

Tratamiento Piernas



Tratamiento Abdomen Post-Parto



Componentes

Los manípulos de **Genesis** han sido diseñados pensando en el profesional, siendo cómodos, ergonómicos y muy ligeros.



Manípulo SRF01

Radiofrecuencia Capacitiva Inteligente
+ LED de Alta Intensidad



30 mm



Manípulo SRF02

Radiofrecuencia Capacitiva Inteligente



60 mm



40 mm



20 mm

Otros componentes incluidos con el equipo son:

La placa de retorno, la caja de cabezales y la bandeja de soporte para los manípulos.



Manípulo SRF03

Radiofrecuencia Resistiva Inteligente



60 mm



40 mm



Manípulo STD01

Vehiculación Transcutánea Inteligente



G1
Balancer



G2
Regenerance



G3
Smoother



G4
Push-Up
& Lift

Compacto, potente, ilimitado y actualizable

Genesis se caracteriza por la simplicidad de su menú, su pantalla táctil y su tamaño compacto, convirtiéndolo en el aliado perfecto de cualquier centro.

Actualizable mediante un USB en el puerto trasero y reiniciándolo, incorporando nuevos programas y soluciones.

mesoestetic® sigue investigando y desarrollando nuevos productos y tratamientos para hacer aún más versátil y potente el equipo **Genesis**.



Ficha técnica

Radiofrecuencia Capacitiva:

Potencia máxima	450 VA
Frecuencia	448 kHz

Radiofrecuencia Resistiva:

Potencia máxima	100 W
Frecuencia	448 KhZ

Pantalla	Pantalla a color táctil
Medidas	37 x 28,5 x 10,5 cm
Peso	7 kg
Garantía	2 años

GENESIS

El primer equipo con la tecnología **SmartDrivity®** Conducción Transdérmica Inteligente.

Tratamientos indoloros, no invasivos y sin efectos secundarios.

Resultados demostrados, duraderos y visibles desde la primera sesión.

Fácil de usar y actualizable.

4+1 Productos para 44 soluciones completas, tanto faciales como corporales.



mesoestetic®

Mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain

294326/1704